

access

Uma gama de produtos **econômicos e eficazes**
para uma prática dentária **mais rentável**

GO-TWO

Conicidade constante

 **Rotação** contínua

Sequência endodôntica de NiTi

- preparação do canal radicular
- alargamento da via de irrigação
- limpeza do canal radicular

CASOS NORMAIS
E/OU DIFÍCEIS



VANTAGENS

Eficácia:

- Muito bom poder de corte
- Boa limpeza do canal graças à conicidade apical
- Fácil remoção de resíduos
- Boa estabilidade graças às arestas múltiplas

Segurança dos instrumentos:

- Pontas não cortantes

Simplicidade:

- Uma sequência fácil para todos os canais

Esterilizáveis a 134 °C

Adaptam-se a todos os motores e contra-ângulos endodônticos de rotação contínua

GO-TWO

CARACTERÍSTICAS

21 mm de comprimento: comprimento de trabalho 16 mm

25 mm de comprimento: comprimentos de trabalho 16 mm e 21 mm

31 mm de comprimento: comprimento de trabalho 21 mm



COMPRIMENTO DE TRABALHO: 16 mm					
CONICIDADE	ISO	VELOCIDADE	TORQUE	21 mm	25 mm
Sortido	N°10-25	-	-	3137520	3137521
	N°25-40	-	-	3137522	3137523
4%	N°10	250	1.2	3137525	3137526
	N°35	250	1.2	3137527	3137528
	N°40	250	2	3137529	3137530
5%	N°15	250	1.2	3137531	3137532
	N°30	250	1.2	3137533	3137534
6%	N°20	250	2	3137535	3137536
	N°25	250	2	3137537	3137538
	N°30	250	1.5	3137539	3137540
	N°35	250	1.5	3137541	3137542
	N°40	250	2	-	3137543
7%	N°25	250	2	3137544	3137545

COMPRIMENTO DE TRABALHO: 21 mm					
CONICIDADE	ISO	VELOCIDADE	TORQUE	25 mm	31 mm
Sortido	N°10-25	-	-	3137524	-
4%	N°10	250	1.2	3137546	3137547
	N°35	250	1.2	-	3137548
	N°40	250	2	-	3137549
5%	N°15	250	1.2	3137550	3137551
	N°30	250	1.2	-	3137552
6%	N°20	250	2	3137553	3137554
	N°25	250	2	3137555	3137556
	N°30	250	1.5	-	3137557
	N°35	250	1.5	-	3137558
	N°40	250	2	-	3137559

Caixa de 6 instrumentos por referência

PROTOCOLO

SEQUÊNCIA BÁSICA

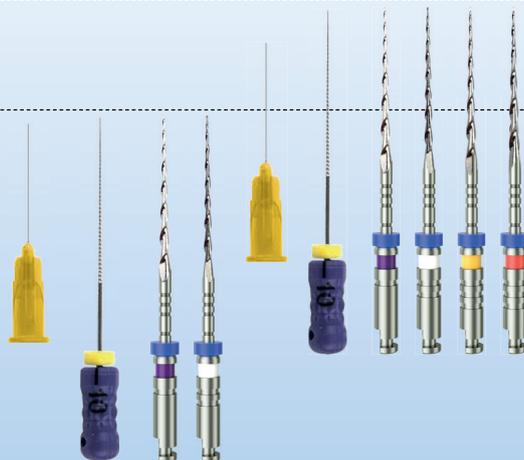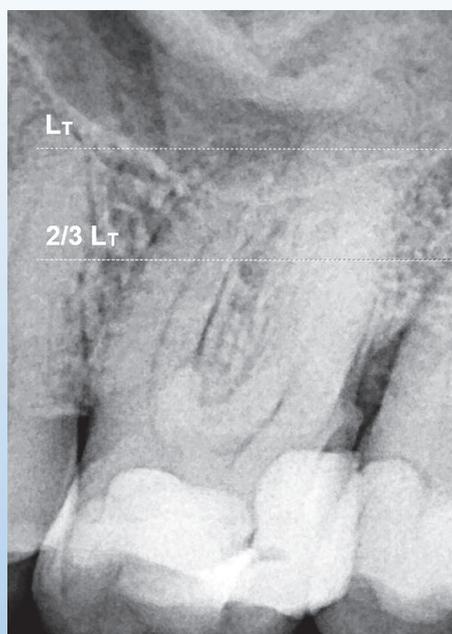

Sequência básica:

10/.04 - 15/.05 - 20/.06 - 25/.06

Alargamento apical:

30/.05 - 35/.04 - 40/.04

Retratamento:

15/.05 - 25/.06 - 25/.07